

ACTIVESHOP®


NÁVOD K POUŽITÍ

ELEGANTE 1897 5V1 MIKRO + VAKUUM + DARSONVAL + ULTRAZVUK + SPREJ


Model M-1897



Dovozce
ACTIV Tomasz
Pacholczyk ul. Graniczna
8b, bud DC2A 54-610
Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2020

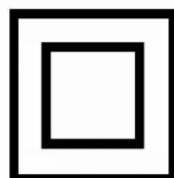

Technické údaje:

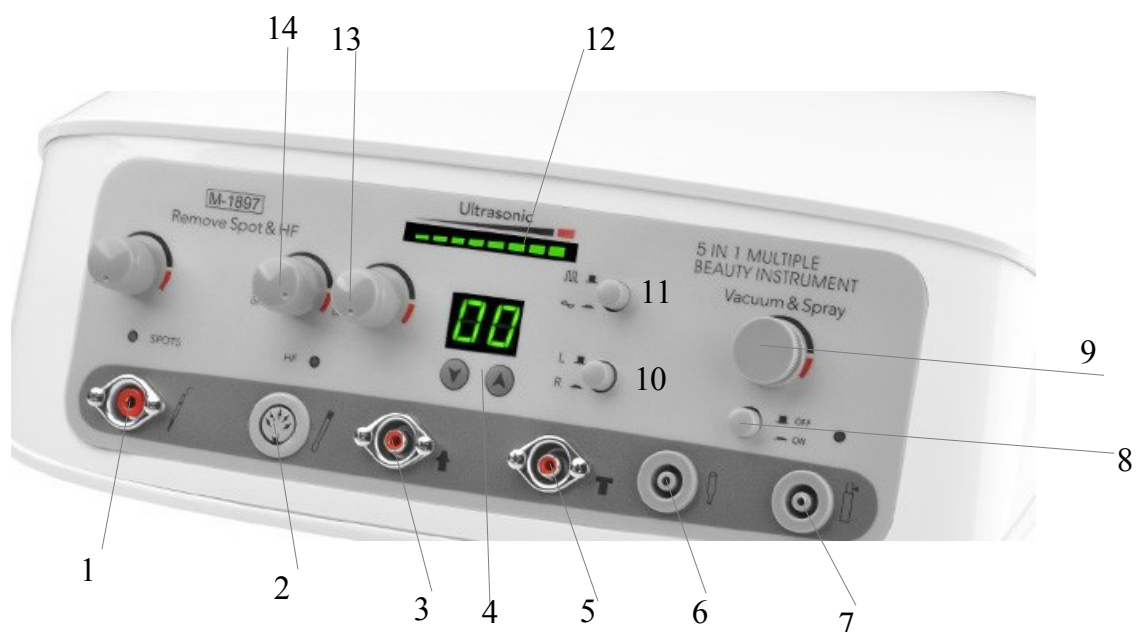

1. Připojení elektrokoagulace,
2. Připojení darsonwala,
3. Připojení ultrazvukové hlavice,
4. Úprava času,
5. Připojení ultrazvukové hlavice,
6. Připojení vakua a mikrodermabraze,
7. Připojovací sprej,
8. Zapnutí/vypnutí vakua a mikrodermabraze,
9. Nastavení sacího výkonu,
10. Výběr ultrazvukové hlavice,
11. Výběr tvaru vlny ultrazvukové léčby,
12. Zobrazení intenzity ultrazvuku,
13. Nastavitelná intenzita ultrazvuku,
14. Úprava intenzity darsonvalu,

DARSONWAL

D'Arsonvalovy proudy jsou jednou z variant vysokofrekvenčních proudů. Zařízení produkuje ozon pomocí elektrostatických výbojů vznikajících v peletách.

Působení d'Arsonvalových proudů je založeno především na účinku na cévy a vegetativní nervová zakončení. Jiskření vznikající mezi elektrodou a kůží způsobuje rozšíření cév a ovlivňuje podkožní tkáň. Vzniklý ozon má dezinfekční účinek. Ošetření se provádí po dobu 5 až 7 minut.

INDIKACE:

- Kožní smyslové poruchy,
- Alopecie areata,
- Stimulace oběhového systému,
- Dezinfekce kůže,

KONTRAINDIKACE :

Těhotenství
Hypertenze
Otok
Nervová hyperaktivita
Srdeční choroby
Zánětlivé kožní stavy
Horečka
Astma
Epilepsie
Kovové implantáty Akné
rosacea
Rozšířené cévy Alergické kožní
onemocnění

ULTRADISMY

Jedná se o systém pro dopravu účinných látek hluboko do pokožky. Přístroj využívá fyzikálního jevu probíhajícího v buněčných membránách pod vlivem ultrazvuku, díky čemuž účinek jednoho ošetření přetrvává v pokožce až 72 hodin.

Ošetření je zcela bezbolestné, během ošetření může klient cítit jemné vibrace vycházející z hlavy.

Sprej

Používá se k jemnému tonizování pleti pomocí vakua a tonika obsaženého v nádobce.

MIKRODERMABRAZE

Jedná se o ošetření, při kterém se pomocí abrazivních diamantových hrotů a sacího výkonu exfoliují povrchové vrstvy epidermis.

Mikrodermabrazie je účinné ošetření pro redukci jemných vrásek, vrásek, hyperpigmentace a jizev po akné. Stimuluje tvorbu kožních buněk a kolagenu. Jedná se o velmi oblíbené neinvazivní kosmetické ošetření. Při pravidelném používání přináší skvělé výsledky pro všechny typy pleti. Výsledky jsou patrné okamžitě.

Indikace

- jizvy po akné,
- černé tečky, bílé tečky,
- rozšířené póry,
- drsná, zrohovatělá kůže,
- ochablost kůže,
- omlazení pleti a odstranění jemných linek a vrásek kolem očí, úst a krku,
- strie,
- suchá pokožka,
- změna barvy a zbarvení,
- poškození pokožky (obličej, ruce, krk) sluncem,
- periwinkle keratóza,
- Acne vulgaris (komedonální, papulární),

- seborea.

Kontraindikace



- virové infekce,
- bakteriální infekce,
- plísňové infekce,
- pustulózní a hnisavé akné,
- rosacea,
- kůže očních víček,
- přerušená kontinuita kůže,
- rakoviny kůže a mateřských znamének,
- kavernózní angiomy,
- Léčba akné přípravkem Roaccutan (doporučuje se alespoň tříměsíční přestávka),
- sklon ke keloidům (jizvení),
- operace obličeje (doporučuje se alespoň dvoutříměsíční přestávka).

Pozor:

Hlavičky pro ošetření mikrodermabrazí musí být čisté a dezinfikované.

Ošetření se provádí na suché pokožce.

Bavlněné filtry pro mikrodermabrazii jsou jednorázové. Pohyby hlavy

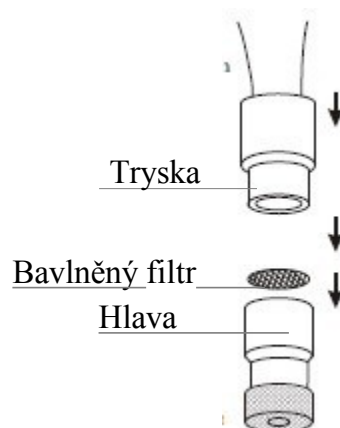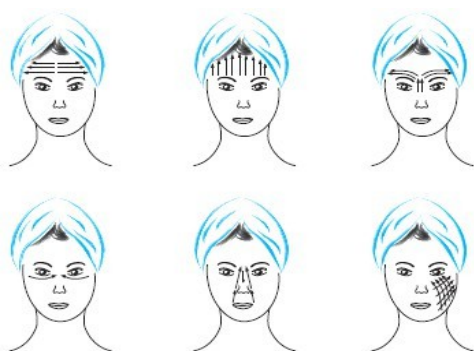

Vakuum

Jedná se o zákrok, při kterém se používá sací síla a ruční přístroje, které jsou přizpůsobeny ošetřované oblasti.

INDIKACE:

- černé tečky,
- rozšířené póry,
- drsná, zrohovatělá kůže,
- ochablost kůže,
- strie,
- **suchá pokožka.**



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabráňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Jakýkoli servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládějte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se může přístroj poškodit.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a

Elektronický odpad by se měl sbírat odděleně a odvážet do sběrných míst pro elektronický a elektrický odpad.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.